



VetSoftware V2

- doplňkové funkce -

návod k použití

verze: 1.0, 28.12.2010



Obsah dokumentu:

- 1) Úvod
- 2) Instalace a konfigurace
- 3) Plošné přecenění položek skladů
- 4) Plošná změna skupiny DPH
- 5) Správa záloh

1) Úvod

Produkt V2 Doplnkové funkce je soubor utilit a doplnkových funkcí pro hlavní větev produktů VetSoftware V2. Vzhledem k povaze funkcí které v současné verzi obsahuje a které dle plánu bude obsahovat, je technicky řešen jako samostatný program.

Dle výše uvedeného se V2 Doplnkové funkce samostatně instalují a spouští, nejsou standardně obsaženy v rámci VetSoftware V2 a obsahují i jiné číslování verzí.

Bližší popis funkcí V2 Doplnkové funkce aktuálně dostupné verze, návod na používání včetně instalace jsou uvedeny na následujících stránkách.

Aktuální verze V2 Doplnkové funkce je 1.0 s datem vydání 28.12.2010

2) Instalace a konfigurace

Stažení z Internetu

Produkt V2 Doplnkové funkce je možné stáhnout ze stránek výrobce www.vetsoftware.eu. Produkt V2 Doplnkové funkce je poskytován jako placená služba, před samotným stažením prosím kontaktujte naše obchodní oddělení které Vám poskytne přesné instrukce jak a kde produkt stáhnout a instalovat.

Instalace

Po stažení instalačního balíku jej stačí spustit z místa kam jste jej stáhli. Instalace je řešena formou jednotlivých kroků u kterých se očekává interakce uživatele, např. potvrzení licenčního ujednání atd.

Po dokončení instalace bude na pracovní ploše Vašeho počítače vytvořena ikona zástupce V2 Doplnkové funkce a odkaz na tento manuál. Jednoduchým dvojklikem na zástupce produkt spustíte.

Upozornění: k fungování programu je nutné mít nainstalán databázový engine FireBird SQL, stáhnout a jednoduše nainstalovat jej můžete z tohoto umístění: <http://www.vetsoftware.eu/?id=4&lang=cz&act=download&sw=firebird2.exe>

Konfigurace

Produkt V2 Doplnkové funkce nepožaduje žádné prvotní nastavení nebo konfiguraci. Nutnou podmínkou pro úspěšné spuštění je instalace do pracovního adresáře aplikace (ve výchozí volbě c:\Program Files\VetSoftware.eu\V2\ případně c:\Program Files (x86)\VetSoftware.eu\V2\ v závislosti na instalované verzi Windows).

Při spuštění si program z konfiguračních souborů aplikace VetSoftware V2 zjistí kde a jak je uložena databáze programu a pokusí se k ní připojit, v případě neúspěchu můžete změnit nastavení na druhé kartě přihlašovacího okna.

Přihlášení **Nastavení**

Cesta k databázi:

Způsob připojení:
 ▼

Adresa serveru:

TCP/IP port:

Upozornění: přihlašovací heslo do V2 Doplnkové funkce je stejné jako Vaše heslo uživatele *Administrator*.

3) Plošné přecenění položek skladů

První volbou v sekci "Sklady a ceny" je funkce pro plošné přecenění cen skladových položek. Na níže uvedeném obrázku vidíte rozložení okna a jednotlivé volby.

Touto funkcí můžete jednoduše změnit ceny skladových položek, kdy můžete samotné změny rozlišovat dle majitele skladů (pokud máte v programu více licencí nebo fungujete např. jako SRO) a dle samotného skladu.


Pro přecenění je nutné vybrat některého z majitelů a nějaký ze skladů.

Následně zadáváte číslo, které je procentní částka o kterou budou jednotlivé ceny navýšeny nebo sníženy (pokud zadáte číslo s minusem např. -10, dojde k zlevnění o 10%).

Poslední volbou je zaokrouhlení výsledných cen, výchozí volba je na 2. desetinná místa, variálně 1. desetinné místo a na celé jednotky (např. celá Eur nebo Kč).

Po kliknutí na tlačítko "Přecenit sklad" program provede zálohu databáze do adresáře /data/ ve formátu *nazevsouboru.fdb.preceneni_cen.cislo*, ověří každou jednotlivou položku skladu (položky s DPH!), sníží jí o příslušnou hodnotu DPH, následně změní cenu dle uvedených procent, opětovně přičte platné DPH a provede zaokrouhlení. Následně ji uloží do databáze.

Po dokončení bude ve volné oblasti seznam změněných položek včetně nových cen.

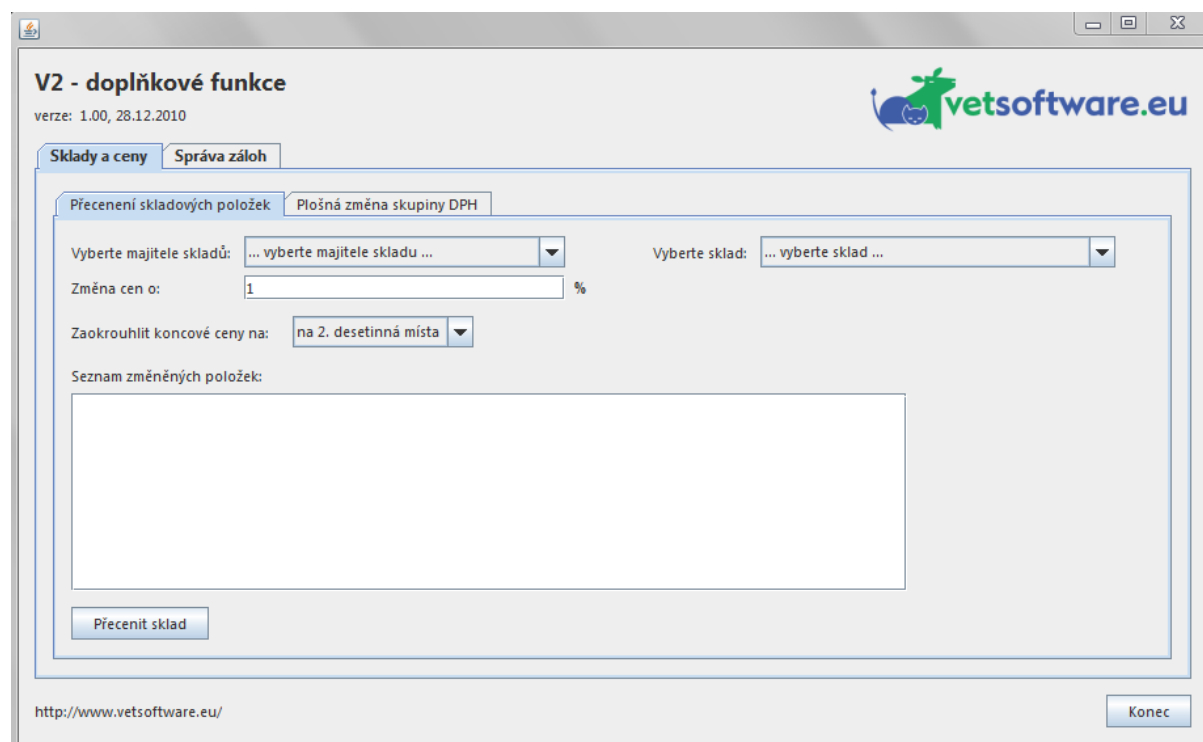

The screenshot shows a software window titled "V2 - doplňkové funkce" with a version number "verze: 1.00, 28.12.2010" and the logo for "vetsoftware.eu". The window has two tabs: "Sklady a ceny" (selected) and "Správa záloh". Inside the "Sklady a ceny" tab, there are two sub-tabs: "Přecenění skladových položek" (selected) and "Plošná změna skupiny DPH". The "Přecenění skladových položek" sub-tab contains the following fields and controls:

- "Vyberte majitele skladů:" dropdown menu with the text "... vyberte majitele skladu ..."
- "Vyberte sklad:" dropdown menu with the text "... vyberte sklad ..."
- "Změna cen o:" text input field containing the number "1" followed by a "%" symbol.
- "Zaokrouhlit koncové ceny na:" dropdown menu with the text "na 2. desetinná místa".
- "Seznam změněných položek:" a large empty rectangular area for displaying the results.
- A "Přecenit sklad" button at the bottom left of the dialog.

At the bottom of the main window, there is a URL "http://www.vetsoftware.eu/" on the left and a "Konec" button on the right.

4) Plošná změna skupiny DPH

Druhou volbou v sekci "Sklady a ceny" je funkce pro plošnou změnu skupiny DPH v rámci všech skladů, například, pokud dojde ke změně hodnoty DPH legislativně. Obecně není možná ve VetSoftware V2 prostá změna stávající skupiny DPH, je nutné vytvoření skupiny nové a změna u jednotlivých položek.

Funkce nabízí jednoduché nastavení současné hodnoty DPH a nové hodnoty, v obou případech jako samostatné číslo. Vzhledem k tomu, že VetSoftware V2 umožňuje evidovat na úrovni karty zboží skupinu DPH jak pro nákup tak pro prodej, je poslední volbou možnost měnit resp. neměnit skupinu i u nákupní DPH.

Po kliknutí na tlačítko "Spustit" program provede zálohu databáze do adresáře /data/ ve formátu *nazevsouboru.fdb.zmena_dph.cislo*, ověří zdali nová skupina DPH již neexistuje (pakliže ano, nastaví správné parametry případně vytvoří novou skupinu) a následně u každé jednotlivé karty zboží změní skupinu DPH na novou.

The screenshot shows a software window titled "V2 - doplňkové funkce" with a version number of 1.00, 28.12.2010. The window contains a navigation menu with "Sklady a ceny" and "Správa záloh". The active tab is "Plošná změna skupiny DPH".

Instructions in the dialog box:

- Po kliknutí na tlačítko "Spustit" systém ověří existenci nové danové skupiny. Pokud neexistuje, vytvoří ji. Pakliže neexistuje, vytvoří novou skupinu.
- Následně veškeré skladové položky z původní skupinou DPH změní na novou skupinu DPH. Skladové ceny zůstanou nezměněny!
- Ve výchozím nastavení program také změní původní skupinu DPH u nákupních cen, tuto funkci můžete vypnout ale je doporučeno ji zachovat zapnutu.

Form fields:

- Původní skupina DPH:
- Nová skupina DPH:
- Měnit DPH u nákupních cen:

Buttons: "Spustit" and "Konec".

Footer: <http://www.vetsoftware.eu/>

5) Správa záloh

Tato funkce se připravuje.

- konec dokumentu -

