

## Nastavení slučování položek na bloček fiskální tiskárny Pegas

27.11.2015

### **POZOR !**

**Uvedená nastavení je nutno provést na všech počítačích kde se vytváří doklady i když nejsou přímo napojeny na fiskální tiskárnu !**

### **KROK 1.**

Vstupte do programu administrátorským heslem.

Z lištového menu v levé horní části hlavního okna volte:

System / Konfigurace aplikace / Systemové konfigurace / System

V tabulce zaškrtněte volbu : „Povolit slučování položek pro FT“. Viz obrázek:

Pri vkladani položiek do účtu vypočítavať cenu z ceny bez DPH	<input type="checkbox"/>
Nenastavovať označenie pokladničných dokladov ktoré neprešli fiškálnou tlačiarňou	<input type="checkbox"/>
Nenastavovať zafarbenie riadkov pokladničných dokladov	<input type="checkbox"/>
Vykonávať súčty pokladničných dokladov dotazom v databáze	<input type="checkbox"/>
Prepočítavať cenu položky predaja pri zmene skupiny DPH	<input type="checkbox"/>
Spúšťať kontrolu tlače bločku fiškálne tlačiarne	<input type="checkbox"/>
Vkladať priebeh kontroly tlače bločku do okna	<input type="checkbox"/>
Nezapisovať priebeh kontroly tlače bločku do súboru	<input type="checkbox"/>
Nenačítať a nezapisovať stav pamäti počas kontroly tlače bločku	<input type="checkbox"/>
Číslovanie riadkov bločku FT podľa modulo-10	<input checked="" type="checkbox"/>
Používať nové tlačové zostavy	<input checked="" type="checkbox"/>
Povolit' zlučovanie položiek pre FT (nutný reštart aplikácie !)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rekapituláciu DPH vypočítavať z ceny bez DPH	<input type="checkbox"/>

Proved'te restart (vypnout/zapnout) programu.


### **KROK 2**

Dále je nutno nastavit sklady, ze kterých se smí položky slučovat. Defaultně je nastaveno pro všechny sklady neslučování položek.

Vstupte do programu a volte modul Katalogy / Úprava katalogů – z rozbalovacího menu vpravo nahoře vyberte tabulky „Sklady“, v levé straně okna vyberte sklad, ze kterého je dovoleno slučovat položky (např.: Léky, Úkony, Materiál), stiskněte klávesu: „F4 – Editovat“, a v rozbalovacím menu vpravo nahoře („Registrace položek do FP“) vyberte volbu: „slučovat do společné položky“. Takto lze nastavit libovolné množství skladů pro slučování.

### **KROK 3**

Při další práci s programem se v okně „Pokladna“ bude nabízet pole pro výběr názvu položky s možností vkládání nových vět, editování a mazání. Viz obrázek:

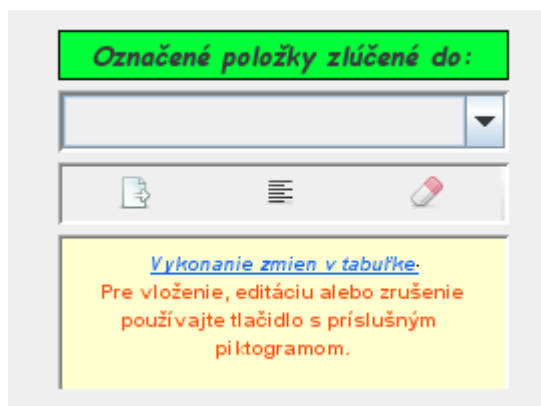

Při vytváření nového účtu (klávesa F5), nebo jeho editaci (klávesa F4) se toto okno zpřístupní a dovolí vybrat název pro sloučené položky na uvedeném účtu. Z tohoto okna lze nové názvy vytvářet, editovat, nebo mazat. Každou uvedenou akci je nutno potvrdit stiskem klávesy Enter.

Při vytváření nového účtu se bude v rozbalovacím menu nabízet první název který je zaveden. Pro každý účet je potřeba vybrat zvolený název.

Pokud chcete nastavit název, který se má defaultně nabízet při zakládání účtu (např. „Vyšetření“) je nutné nastavení v konfiguracích.


### **KROK 4**

Vstupte do programu administrátorským heslem.

Z lištového menu v levé horní části hlavního okna volte:

Systém / Konfigurace aplikace / Systémové konfigurace / Ekonomika

Ve třetím sloupci dole naleznete volbu: „Defaultní název sloučené položky do FP“. Viz obrázek:

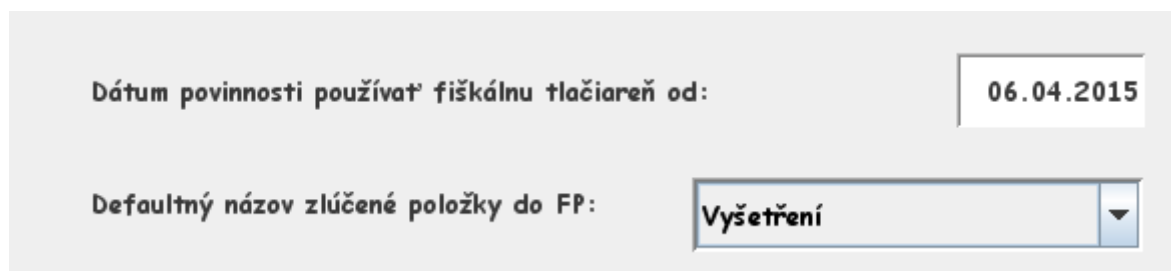

Nastavte z výběrového menu volený název a potvrďte klávesou „F2 – Uložit“ ve spodní části okna. Pozn.: Odtud nelze názvy položek vytvářet ani upravovat, pouze vybrat. Vytvoření ev. úpravu je nutno provést v modulu „Pokladna“.

Od této chvíle se v modulu pokladna při vytváření nového účtu bude nastavovat tento zvolený název pro sloučené položky. V záložce: „Účet“ pak budou položky které se sloučí do vybraného názvu označeny zelenou podkladovou barvou. Viz obrázek:

Terapia, úkon	Zak.cena	Rabat	Cena/j	Množstvo	DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
Lék01	10,00	0,50	5,00	2,000	20,00	8,33	1,67	10,00
Lék02	5,00	0,50	2,50	2,500	20,00	5,21	1,04	6,25
Úkon01	15,00	0,50	7,50	1,000	20,00	6,25	1,25	7,50
Krmivo01	10,00	1,00	10,00	1,000	20,00	8,33	1,67	10,00
Krmivo02	15,00	1,00	15,00	1,000	20,00	12,50	2,50	15,00
Materiál01	0,10	1,00	0,10	5,000	20,00	0,42	0,08	0,50
Materiál02	0,15	1,00	0,15	10,000	20,00	1,25	0,25	1,50
Veterinární dieta01	14,00	0,50	7,00	1,000	20,00	5,83	1,17	7,00

Označené položky zlučené do:

Vyšetření

Poznámka (bude vytlačené na doklad)

48,12

*Vykonanie zmien v tabuľke.*

Pre vloženie, editáciu alebo zrušenie používajte tlačidlo s príslušným piktogramom.

Účet bol už zaplatený

Spočítať položky účtu

Pokud bude chtít klient vytisknout seznam položek, které se sloučily lze použít tiskovou sestavu programu: Klávesa „F9 – Náhled/Tisk / Tisková sestava V2.

Výsledná podoba bločku:

```

-----
Vyšetření 20.00%          25.75 bez
Veterinární dieta01      7.00 bez
Krmivo02                  15.00 bez
Krmivo01                  10.00 bez
CELKOM                    57.75 €
-----
KARTA                      57.75 €
CELKOM                    57.75 €
-----
no: HO/2015/11/00000778
DKP:0123456789012345 SN:   TPG1900001
27/11/2015 11:36 č. ú/2:00001/00142
Zaregistroval:
Ivo šejc
27.11.2015 11:32

00001271115113600001

```

Pokud se sloučí položky v různých skupinách DPH, program je oddělí a sečte zvlášť. Na bločku pak budou tištěny v samostatném řádku např.: Vyšetření 20.00%, Vyšetření 10.00%.

**Uvedené obrázky slouží pouze pro ilustraci !**